



INFO-ÉCLAIR

Caractéristiques

- Technologie brevetée de DEL blanche de longue durée
- Revêtement fait de plastique ABS durable
- 100-240 V et trousse de 4 fiches internationales (pour utilisation à l'échelle mondiale)

Dimensions

- 12,7 cm sur 12,7 cm sur 2,5 cm

Poids

- 10 oz (327 g)

Descriptif d'électricité

- Courant : 2,4 Watts
- Voltage : 12 V CC
- CC/Ampères : 200 mA

Garantie

- 5 ans

Code UPC

- 835937000126

Pays de fabrication

- Chine



Si vos patients et vos clients ont des questions au sujet de leurs produits Litebook®, référez-les au service à la clientèle de Litebook. Composez le 1-877-723-5483 sans-frais du lundi au vendredi, de 8h à 16h, heure des Rocheuses, ou visitez le www.litebook.com.



LITEBOOK® ADVANTAGE

LA LUMIÈRE QU'IL VOUS FAUT ... CHAQUE JOUR®

Améliore l'humeur • Augmente le niveau d'énergie • Accroît la vigilance

- Aide à retrouver de saines habitudes de sommeil • Sécuritaire
- Convivial • Recommandé par les médecins



WWW.LITEBOOK.COM




TOUT LE MONDE SE SENT MIEUX QUAND IL FAIT SOLEIL

C'est fou ce qu'un peu de lumière peut accomplir. La lumière du soleil améliore notre attitude, nous rend plus optimiste et nous donne de l'énergie, mais la plupart d'entre nous passons presque tout notre temps à l'intérieur. Très peu de gens ont accès à la lumière du soleil dont ils ont besoin.

Voici le Litebook® Advantage. Cet appareil de luminothérapie unique et pratique émet des longueurs d'ondes de lumière identiques au cumul des longueurs d'ondes du soleil, sans les rayons UV nocifs. Après seulement 15 à 30 minutes par jour, on peut avoir l'impression d'avoir passé une belle journée ensoleillée à la plage... sans quitter sa maison, son bureau ou sa chambre d'hôtel.



FOIRE AUX QUESTIONS

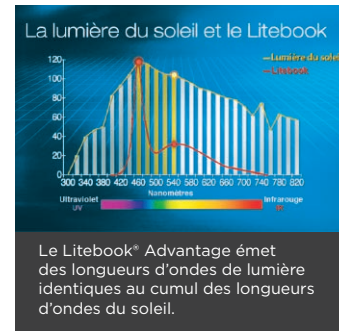

Q. : Combien de 'lux' le Litebook® Advantage émet-il ?

R. : Selon les recherches, l'efficacité de la luminothérapie dépend moins de l'intensité (LUX) que de la longueur d'onde de la lumière. Les longueurs d'onde les plus importantes sont identiques au cumul des longueurs d'onde du soleil. C'est ce qu'on appelle le « spectre d'efficacité » de la luminothérapie. (VOIR LE TABLEAU.)

- La plupart des utilisateurs constatent qu'ils ont besoin de MOINS de temps (de 15 à 30 minutes par jour) avec les produits Litebook® qu'avec des appareils plus gros de 10 000 lux.

• Le Litebook® Advantage émet de la lumière d'une intensité de 10 000 lux à une distance de 50 cm à 60 cm.

Q. : Quelle sorte d'ampoule le Litebook® Advantage utilise-t-il ?

R. : Le Litebook® utilise des DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES (DEL) blanches brillantes qui émettent de la lumière identique au cumul des longueurs d'onde du soleil, ce qui augmente notre niveau d'énergie et nous rend plus alerte, comme si nous étions au grand soleil. (VOIR LE TABLEAU.)

Q. : Et si une DEL s'éteint ?

R. : Les DEL durent longtemps. Elles peuvent durer jusqu'à 100 000 heures, soit l'équivalent de 12 années d'utilisation continue.

- Si une DEL s'éteint au cours des cinq années suivant l'achat du produit, cela tombera sous la garantie de cinq ans de Litebook®.

Q. : Le Litebook® Advantage est-il sécuritaire ?

R. : Oui. Le Litebook® Advantage n'émet AUCUNE radiation UV, c'est-à-dire qu'il ne présente aucun danger pour les yeux ou la peau.

- Le Litebook® Advantage ne favorise pas la production de vitamine D.
- Tous les produits Litebook sont soumis à de nombreuses vérifications à l'étape de la fabrication pour garantir la sécurité oculaire.

Q. : Le Litebook® Advantage peut-il surchauffer ?

R. : Non. L'appareil de luminothérapie peut rester branché sans jamais surchauffer.

Q. : Peut-on utiliser le Litebook® Advantage si on porte des lunettes ?

R. : Oui. Les lunettes, y compris les verres de contact ou à teinte variable, n'affecteront PAS les résultats des produits Litebook®.

Q. : Les frais liés à la luminothérapie sont-ils remboursables par mon assureur ou mon fournisseur de soins de santé ?

R. : Dans bon nombre de pays, les patients peuvent demander à leur assureur de rembourser l'achat d'un produit de luminothérapie Litebook®. Nous invitons les patients à se renseigner auprès de leur assureur afin de vérifier l'étendue de leur régime.