



## INFO-ÉCLAIR

### Caractéristiques

- Technologie brevetée de DEL blanche de longue durée
- Batterie au lithium-ion rechargeable (avec indicateur de charge)
- Revêtement fait de plastique ABS durable

### Dimensions

- 13,6 cm sur 7,3 cm sur 1,6 cm

### Poids

- 130 g. / 4,6 oz

### Descriptif d'électricité

- Courant : 2,5 Watts
- Voltage: 5 V
- Ampères : 0,5 mA

### Adaptateur AC (inclus)

- 100-240 V et trousse de 4 fiches internationales (pour utilisation à l'échelle mondiale)
- Câble USB

### Garantie

- 2 ans

### Code UPC

- 835937000119

### Pays de fabrication

- Chine



Si vos patients et vos clients ont des questions au sujet de leurs produits Litebook®, référez-les au service à la clientèle de Litebook. Composez le 1-877-723-5483 sans-frais du lundi au vendredi, de 8h à 16h, heure des Rocheuses, ou visitez le [www.litebook.com](http://www.litebook.com).



L I T E B O O K<sup>®</sup>  
E D G E<sup>™</sup>

## LA LUMIÈRE QU'IL VOUS FAUT ... CHAQUE JOUR<sup>®</sup>

Améliore l'humeur • Augmente le niveau d'énergie • Accroît la vigilance

- Aide à retrouver de saines habitudes de sommeil • Sécuritaire
- Convivial • Recommandé par les médecins



[WWW.LITEBOOK.COM](http://WWW.LITEBOOK.COM)




## TOUT LE MONDE SE SENT MIEUX QUAND IL FAIT SOLEIL

C'est fou ce qu'un peu de lumière peut accomplir. La lumière du soleil améliore notre attitude, nous rend plus optimiste et nous donne de l'énergie, mais la plupart d'entre nous passons presque tout notre temps à l'intérieur. Très peu de gens ont accès à la lumière du soleil dont ils ont besoin.

Voici le Litebook® Edge™. Cet appareil de luminothérapie portable émet des longueurs d'ondes de lumière identiques au cumul des longueurs d'ondes du soleil, sans les rayons UV nocifs. Après seulement 15 à 30 minutes par jour, vous pouvez avoir l'impression d'avoir passé une belle journée ensoleillée à la plage... sans quitter votre maison, votre bureau ou votre chambre d'hôtel.



## FOIRE AUX QUESTIONS

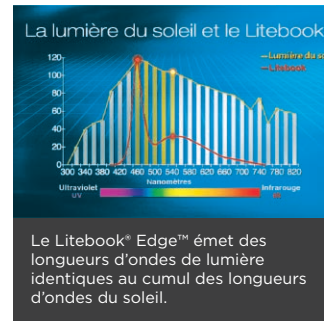

**Q. : Combien de 'lux' le Litebook® Edge™ émet-il ?**

**R. :** Selon les recherches, l'efficacité de la luminothérapie dépend moins de l'intensité (LUX) que de la longueur d'onde de la lumière. Les longueurs d'onde les plus importantes sont identiques au cumul des longueurs d'onde du soleil. C'est ce qu'on appelle le « spectre d'efficacité » de la luminothérapie. (VOIR LE TABLEAU.)

- La plupart des utilisateurs constatent qu'ils ont besoin de MOINS de temps (de 15 à 30 minutes par jour) avec les produits Litebook® qu'avec des appareils plus gros de 10 000 lux.

- Le Litebook® Edge™ émet de la lumière d'une intensité de 10 000 lux à une distance de 50 cm à 60 cm.

**Q. : Quelle sorte d'ampoule le Litebook® Edge™ utilise-t-il ?**

**R. :** Le Litebook® utilise des DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES (DEL) blanches brillantes qui émettent de la lumière identique au cumul des longueurs d'onde du soleil, ce qui augmente votre niveau d'énergie et vous rend plus alerte, comme si vous étiez au grand soleil. (VOIR LE TABLEAU.)

**Q. : Et si une DEL s'éteint ?**

**R. :** Les DEL durent longtemps. Elles peuvent durer jusqu'à 100 000 heures, soit l'équivalent de 12 années d'utilisation continue.

- Si une DEL s'éteint au cours des deux années suivant l'achat du produit, cela tombera sous la garantie de deux ans de Litebook®.

**Q. : Le Litebook® Edge™ est-il sécuritaire ?**

**R. :** Oui. Le Litebook® Edge™ n'émet AUCUNE radiation UV, c'est-à-dire qu'il ne présente aucun danger pour les yeux ou la peau.

- Le Litebook® Edge™ ne favorise pas la production de vitamine D.
- Tous les produits Litebook sont soumis à de nombreuses vérifications à l'étape de la fabrication pour garantir la sécurité oculaire.

**Q. : Peut-on surcharger la batterie du Litebook® Edge™ ?**

**R. :** Non. On peut laisser la nouvelle batterie au lithium-ion « intelligente » branchée sans jamais la surcharger.

- Nous vous suggérons de garder le Litebook® Edge™ chargé.

**Q. : Pendant combien de temps la batterie du Litebook® Edge™ retient-elle sa charge ?**

**R. :** La batterie émet de la lumière pendant jusqu'à six heures si elle est chargée au complet.

- Comme toute batterie, après une utilisation continue (de cinq ans ou plus), la batterie retiendra moins bien sa charge et devra être rechargée plus souvent.

**Q. : Peut-on utiliser le Litebook® Edge™ si on porte des lunettes ?**

**R. :** Oui. Les lunettes, y compris les verres de contact ou à teinte variable, n'affecteront PAS les résultats des produits Litebook®.

**Q. : Les frais liés à la luminothérapie sont-ils remboursables par mon assureur ou mon fournisseur de soins de santé ?**

**R. :** Dans bon nombre de pays, les patients peuvent demander à leur assureur de rembourser l'achat d'un produit de luminothérapie Litebook®. Nous invitons les patients à se renseigner auprès de leur assureur afin de vérifier l'étendue de leur régime.