

La lumière  
qu'il vous **faut...**  
chaque jour®



# LITEBOOK ADVANTAGE



## Guide de l'utilisateur

Modèle LB3.0

Visitez [www.litebook.com](http://www.litebook.com)

**Merci d'avoir fait l'achat du Litebook Advantage. Si vous utilisez et entretenez ce produit de façon appropriée, vous profiterez d'une luminothérapie sécuritaire, efficace et sans problèmes pendant de nombreuses années.**

**Veillez lire ce guide de l'utilisateur au complet et suivre toutes les instructions portant sur l'utilisation et l'entretien afin de profiter au maximum des avantages de ce produit. Conservez ce guide pour consultation future.**

**Pour les détails complets sur ce produit et autres produits Litebook, visitez [www.litebook.com](http://www.litebook.com)**

## INFORMATION GÉNÉRALE

Le Litebook Advantage représente un moyen efficace de profiter de la lumière naturelle. Sa portabilité unique permet à l'utilisateur de poursuivre ses activités quotidiennes et d'apprécier une source de lumière additionnelle, tout en offrant le côté pratique et économique d'une lumière compacte et efficace.


Le Litebook Advantage est programmé automatiquement pour une session de 30 minutes, qui convient à la plupart des utilisateurs et des applications. L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 30 minutes. Les lumières indicatrices vertes dans le coin en haut à droite vont s'éteindre une par une au fur et à mesure que le temps s'écoule. Chaque fois que vous allumez votre Litebook, les 4 lumières indicatrices vertes vont réapparaître.

## ENTRETIEN DE VOTRE LITEBOOK ADVANTAGE:

Au besoin, nettoyez la lentille et le produit avec un chiffon humide doux. Aucun entretien régulier n'est nécessaire.

## ADAPTATEUR

Pour brancher l'adaptateur 100 / 240 V, glissez la prise de courant approprié contre l'adaptateur tel qu'indiqué ci-dessous. Glissez jusqu'au petit déclic qui indique que la prise est bien en place.

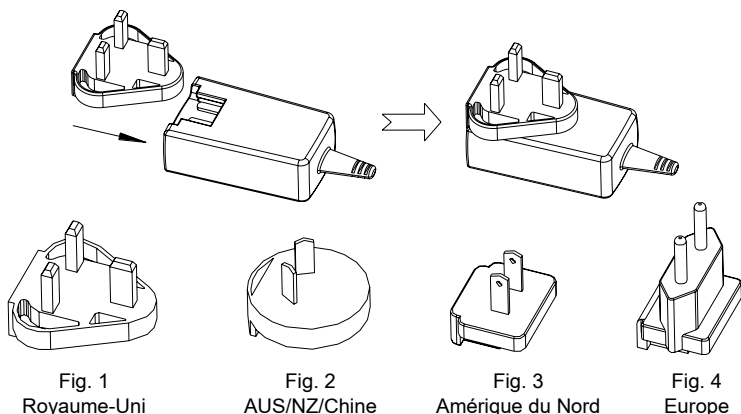


Consultez le schéma ci-dessous afin de bien aligner le Litebook Advantage. Le Litebook Advantage peut être décalé vers la droite ou vers la gauche sur une distance de 20 à 24 pouces. L'utilisation recommandée est de 15-30 minutes par jour à 20-24 pouces.



Normalement, vous devriez le savoir lorsque vous aurez bénéficié de suffisamment de lumière; généralement, vous vous sentirez plus alerte, plus énergique et/ou de meilleure humeur qu'auparavant.

## LITEBOOK ADVANTAGE – CARACTÉRISTIQUES

**Fig. 1**

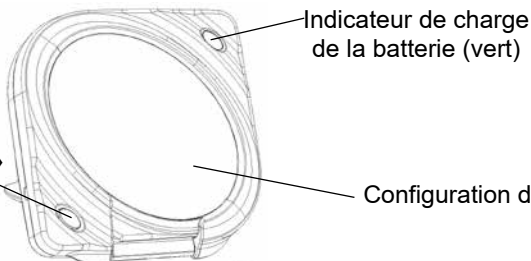


Bouton « on/off »  
(marche/arrêt)

Indicateur de charge  
de la batterie (vert)

Configuration des DEL blancs

**Fig. 2**

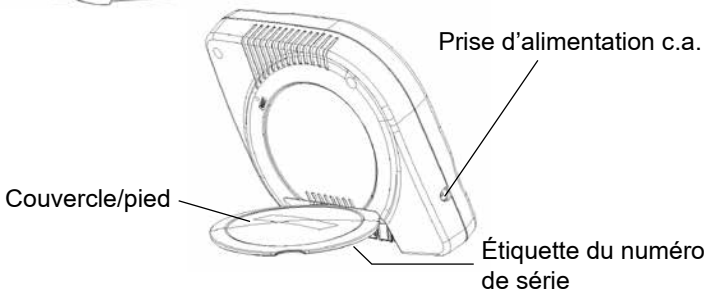

Prise d'alimentation c.a.

Couvercle/pied

Étiquette du numéro  
de série

## IMPORTANT

- SUIVRE LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT.
- Le Litebook Advantage émet un rayon de lumière blanche intense. **NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LA SOURCE DE LUMIÈRE.** Par contre, il n'est **PAS** dangereux de regarder de temps en temps la lumière pendant quelques secondes, mais cette pratique pourrait causer de l'inconfort à certaines personnes.
- Nous vous encourageons à utiliser le Litebook tout en vaquant à d'autres occupations, comme la lecture, les repas, le maquillage ou le travail à l'ordinateur ou sur votre bureau.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit si vous avez des antécédents de maladie des yeux ou encore si vous prenez des médicaments pour traiter la dépression ou un trouble de l'humeur qui vous rendent photosensibles (extrêmement sensibles à la lumière). Consultez votre ophtalmologiste ou votre médecin si vous avez des inquiétudes au sujet de l'utilisation de ce produit.
- De temps en temps, des effets secondaires bénins peuvent se produire, par exemple des maux de tête ou une sensation de brûlure dans les yeux. Normalement, ceux-ci devraient disparaître après quelques jours. Si les effets secondaires, ceux mentionnés précédemment ou d'autres, ne disparaissent pas après trois jours, interrompez l'utilisation du Litebook Advantage et consultez un médecin.
- N'utilisez ce produit qu'avec l'alimentation fournie et suivez les instructions attentivement.

**Si vous éprouvez des difficultés à utiliser votre Litebook Advantage, contactez l'assistance technique. En Amérique du Nord, composez le numéro sans frais 1-877-723-5483 ou envoyez un courriel à [info@litebook.com](mailto:info@litebook.com)**

# GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

The Litebook Company Ltd. (« Litebook ») garantie, sous réserve des conditions stipulées ci-dessous, la réparation ou le remplacement de toute pièce défectueuse en raison d'un défaut de fabrication ou de matériel tout au long de la période couverte par la garantie, et ce, sans frais pour le coût des pièces et de la main-d'œuvre.

**Service post-garantie:** Après l'expiration de la garantie, contactez la société par téléphone ou par courriel à Litebook pour les options de mise à niveau et les prix.

## CONDITIONS

1. Réparation non autorisée, abus, etc. : L'article ne doit pas avoir été altéré, modifié, réparé ou entretenu par aucune autre entité que The Litebook Company Ltd. Le numéro de série apparaissant sur l'article ne doit avoir été ni modifié ni retiré. L'article ne doit pas avoir fait l'objet d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, ni avoir été utilisé d'une façon non conforme aux instructions du mode d'emploi.
2. **Livraison correcte:** Avant de retourner l'appareil pour réparation ou remplacement, s'il vous plaît contactez Litebook par téléphone au numéro sans frais en Amérique du Nord **1-877-723-5483**, ou à l'**extérieur de l'Amérique du Nord, présentez-vous au lieu d'achat.**
3. **Preuve de la date d'achat :** Cette garantie s'applique au produit à compter de la date d'achat. Par conséquent, le propriétaire doit fournir une preuve d'achat sous forme de facture ou de reçu.

**RETOURS : Tous les produits Litebook retournés en vertu de la garantie de remboursement de 60 jours doivent être retournés au point de vente.** Veuillez consulter la politique sur les retours au point de vente ainsi que les politiques énoncées sur le site [www.litebook.com](http://www.litebook.com). TOUS les éléments composants doivent être inclus afin que vous puissiez recevoir un remboursement complet total excepté tous les frais de port et de manutention applicables. Avant de retourner un Litebook qui a été acheté directement de The Litebook Company Ltd. de façon directe, veuillez communiquer avec The Litebook Company Ltd. en composant le numéro sans frais 1-877-723-5483 depuis l'Amérique du Nord endroit pour recevoir un numéro d'autorisation et les directives d'expédition. Tous les frais encourus par The Litebook Company Ltd. en raison d'étiquettes d'expédition erronées ou d'instructions non suivies seront facturés au client.

SAUF DANS LES CAS OÙ UNE LOI EN VIGUEUR L'INTERDIT, Litebook RENONCE FORMELLEMENT À TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN VERTU DE LA LOI, D'UN STATUT OU DE TOUTE PRATIQUE CONSACRÉE DE COMMERCE, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES OU LES CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Litebook NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE D' UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT VÉRITABLE DE L'ARTICLE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU INDIRECT ATTRIBUABLE À L'UTILISATION DE L'ARTICLE ET Litebook N'ASSUME AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ ET N'AUTORISE AUCUN REPRÉSENTANT NI AUCUNE AUTRE PERSONNE À ASSUMER AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ QUI N'EST PAS STIPULÉE DANS LES PRÉSENTES.

## VEUILLEZ CONSERVER CETTE NOTICE POUR VOS DOSSIERS

Ce guide renferme des renseignements généraux sur le produit et il ne cherche pas à remplacer une consultation médicale. Les renseignements inclus dans ce guide n'ont pas été évalués par la FDA. Veuillez consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. Ce produit n'est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.

Le « Litebook » et « La lumière qu'il vous faut... chaque jour » sont des marques de fabrique déposées par le fabricant The Litebook Company Ltd.

© The Litebook Company Ltd. 2014, tous droits réservés.

#6- 941 South Railway St SE Medicine Hat, AB T1A2W3

Imprimé en Chine.